


ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 3-DIFF АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

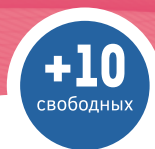

Габариты: 32x26x36.5 см. Вес 12 кг

HumaCount 30^{TS} / 80^{TS}

- Производитель HUMAN (Германия)
- Анализ от 45 секунд
- 25 мкл цельной крови, 50 мкл разведенной
- Автоматический пробозаборник
- Подходят пробирки разных производителей
- Предотвращение образования сгустков
- Встроенный термопринтер
- Полностью русифицирован



**МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО
ПАРАМЕТРОВ СРЕДИ
3-DIFF ПРИБОРОВ**



**НИЗКАЯ
ЦЕНА
АНАЛИЗА**



**НЕ ТРЕБУЕТ
ИНСТАЛЛЯЦИИ
ИНЖЕНЕРОМ**

БОЛЬШОЙ И ПОНЯТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

22 ПАРАМЕТРА + 3 ГИСТОГРАММЫ

WBC	лейкоциты + гистограмма	RBC	эритроциты + гистограмма
HGB	гемоглобин	HCT	гематокрит
MCV	средний объем эритроцитов	PLT	тромбоциты + гистограмма
MCHC	ср. конц. гемоглобина в эритроцитах	MCH	ср. содержание гемоглобина в эритроците
LYM	лимфоциты	LYM%	% лимфоцитов
MID	моноциты/эозинофилы	MID%	% моноцитов/эозинофилов
GRA	гранулоциты	GRA%	% гранулоцитов
MPV	средний объем тромбоцитов	PCT	тромбокрит
RDWsd	ширина распределения эритроцитов - стандартное отклонение	RDWcv	ширина распределения эритроцитов - коэффициент вариации
PDWsd	ширина распределения тромбоцитов - стандартное отклонение	PDWcv	ширина распределения тромбоцитов - коэффициент вариации
P-LCC	фракция больших тромбоцитов	P-LCR	коэффициент больших тромбоцитов




ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель
компании HUMAN (Германия) с 1994 года в РФ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 3-DIFF АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

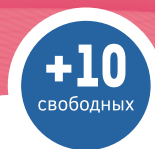

Системные реагенты




- Разбавитель изотонический (фасовка 20л)
 - Реагент лизирующий (фасовка 2*1л)
 - Реагент очищающий (фасовка 1л)
- После вскрытия реагенты стабильны 90 дней
- Рекомендуем использовать контрольные материалы и калибраторы HUMAN или J.T.Baker

Раздел меню «Статус реагентов» содержит информацию о номере лота, сроке годности и проценте расхода каждого реагента, а также рассчитывает количество исследований, на которое хватит оставшихся растворов. В этом же меню можно просмотреть журнал замены реагентов.

Результаты

- Расчётные показатели
- Отображение диапазонов норм
- Цветная маркировка нормы и патологии
- Результат можно распечатать как на встроенном термопринтере, так и на внешнем принтере

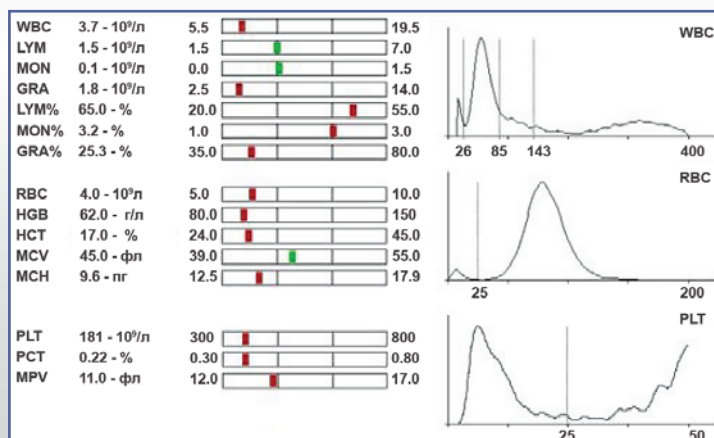

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Меню контроля качества позволяет проводить ежедневный мониторинг воспроизводимости и точности работы анализатора. В этом меню можно ввести новый лот контроля, посмотреть данные предыдущих лотов и распечатать графики Леви-Дженнингса.
- Анализатор имеет многопользовательский режим, что позволяет ограничить авторизованный доступ к особенно важным функциям системы таким, как техническое обслуживание или калибровка.



ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель
компании HUMAN (Германия) с 1994 года в РФ