


HUMAN

(Германия)

ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

HUMAREADER HS

кат. № 16670

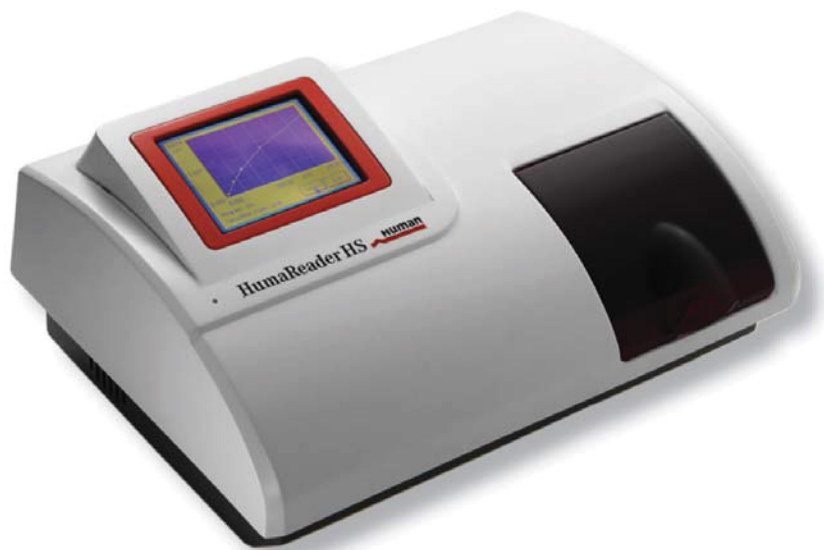

HUMAREADER HS - высокоскоростной полуавтоматический планшетный анализатор для иммуноферментного анализа.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 загружаемый 96-луночный микропланшет
- русифицированное меню
- стандартный набор фильтров: 405, 450, 492, 630 нм
- диапазон шкалы измерения: от 0 до 3,500 единиц ОП
- одно- и двухволновое измерение
- 8-канальное фотометрирование
- точность: +/- 1% или 0,007 единиц ОП (0-2,000 единиц ОП)
- линейность: +/- 2% или 0,007 единиц ОП
- сохранение калибровочных кривых
- режимы расчета результатов: оптическая плотность, по cut-off, по одному калибратору, по калибровочной кривой (кусочно-линейная, линейная регрессия, экспоненциальная регрессия, логарифмическая регрессия, кубическая сплайн-функция)
- автоматический расчет и вывод результатов на дисплей и внешний принтер

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

время измерения планшета – 5 секунд

ОСОБЕННОСТИ

- память на 200 методик и 10 000 результатов по образцам пациентов
- сенсорная панель + указатель-стилус / манипулятор «мышь»
- программное обеспечение в среде ОС Windows
- возможность оценки на одном планшете результатов до 12-ти тестов
- встроенный шейкер
- необходим внешний принтер

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 46х34х23 см

ВЕС: 7 кг