

# RAMP COVID-19 Antigen Test: набор реагентов для диагностики COVID-19



## НОВИНКА!

- ▶ Быстрый приборный анализ
- ▶ Простая постановка теста
- ▶ Печать результата



кат. № C1120-25  
25 тестов в наборе

## Качественное экспресс-определение нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в назальном мазке с помощью анализатора RAMP 200 System



**Метод:** иммунохроматография с флуоресцентной детекцией

**Набор:** всё необходимое в составе, в том числе положительный и отрицательный контрольные образцы


**Анализ:** 15 минут

**Результаты:** хранение, распечатка, передача в ЛИС


**Производительность:** до 6 проб одновременно - 24 теста в час, благодаря масштабируемости RAMP 200 System

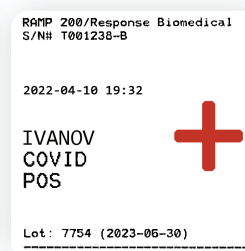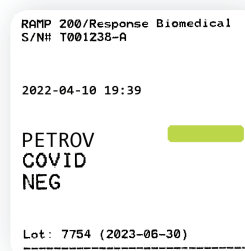


## Простая процедура анализа

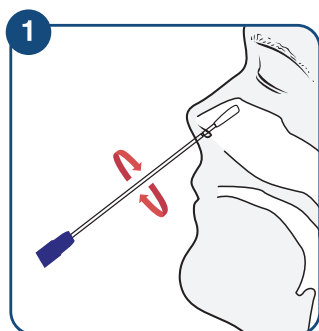

1 Получить назальный мазок

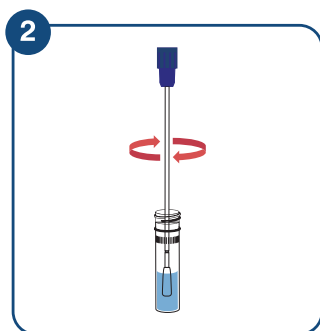

2 Провести элюцию и перемешивание образца

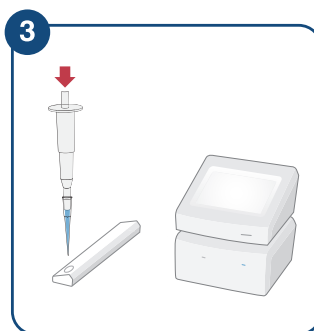

3 Внести 75 мкл образца в тест-кассету и поместить ее в анализатор, результат выдается автоматически



Дополнительная информация и обучающее видео

Согласно Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при лечении больных COVID-19 необходим мониторинг содержания **D-димера, прокальцитонина, тропонина I и NT-proBNP**. Эти и другие биомаркеры могут быть исследованы количественно при помощи системы RAMP

Все тест-системы и оборудование RAMP зарегистрированы в Росздравнадзоре  
RAMP COVID-19 Antigen Test, серия M07754/13147 – P3H 2022/16840 от 06.04.2022