



# БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ


Standard Diagnostics (Южная Корея)

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2010/06183 от 04.03.2014

Экспресс-определение наркотических веществ с помощью тест-систем производства компании Standard Diagnostics основано на одностадийном иммунохроматографическом методе. Тесты разработаны для качественного скрининга и позволяют в течение пяти минут определить в образце мочи каннабиноиды, кокаин, амфетамин, метамфетамин, опиаты и экстази.

При выполнении быстрых тестов не требуется оборудование, все необходимое включено в наборы. Нужно внести три капли исследуемого образца в окошко для проб и после 5-минутной инкубации интерпретировать результат в тестовой зоне. При отрицательном результате, когда концентрация вещества ниже порогового уровня, образуются две полосы - тестовая и контрольная, при положительном - одна контрольная полоса.

## Процедура анализа

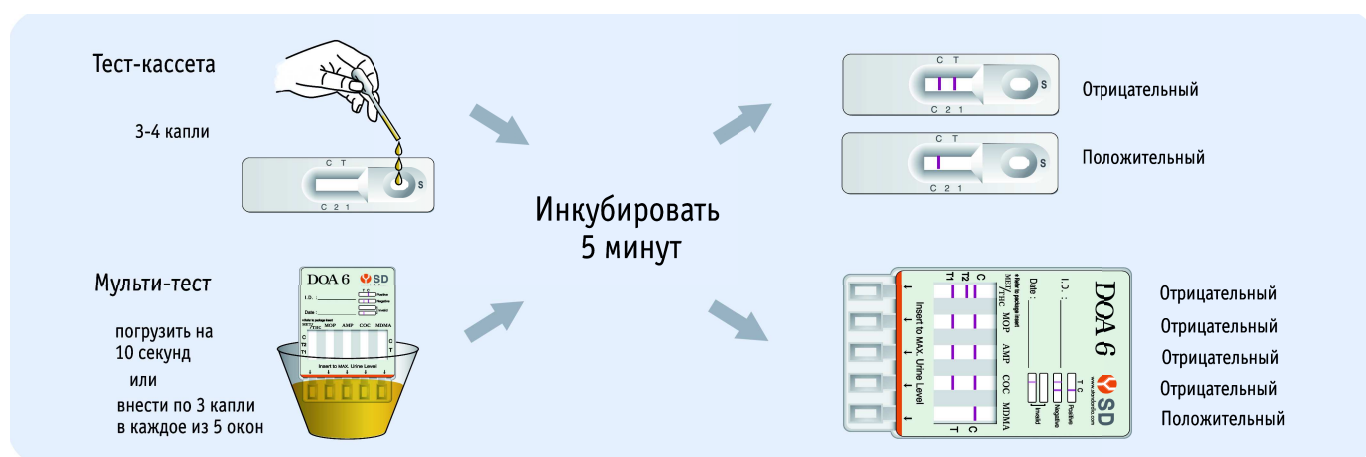

## Информация для заказа

Название	Кат. №	Количество тестов	Пороговые значения, нг/мл
Опиаты	50FK10	25 тестов	300
Метамфетамин	50FK20		1000
Амфетамин	50FK30		1000
Кокаин	50FK40		300
Каннабиноиды	50FK50		50
Экстази	50FK100		500
Мульти-6: метамфетамин/марихуана/морфин/ амфетамин/кокаин/экстази (раздельно)	50FK130	10 тестов	1000/50/300/1000/300/500

ЗАО "АНАЛИТИКА" - авторизованный представитель компании Standard Diagnostics в России.

ЗАО "АНАЛИТИКА" Телефон: (495) 737 0363, 748 1168 Факс: 737 0365  
129343 Москва а/я 93 E-mail: info@analytica.ru http://www.analytica.ru